


МАССАЖНАЯ КРОВАТЬ
Lux Tag JMB-004/ ALL

Руководство пользователя

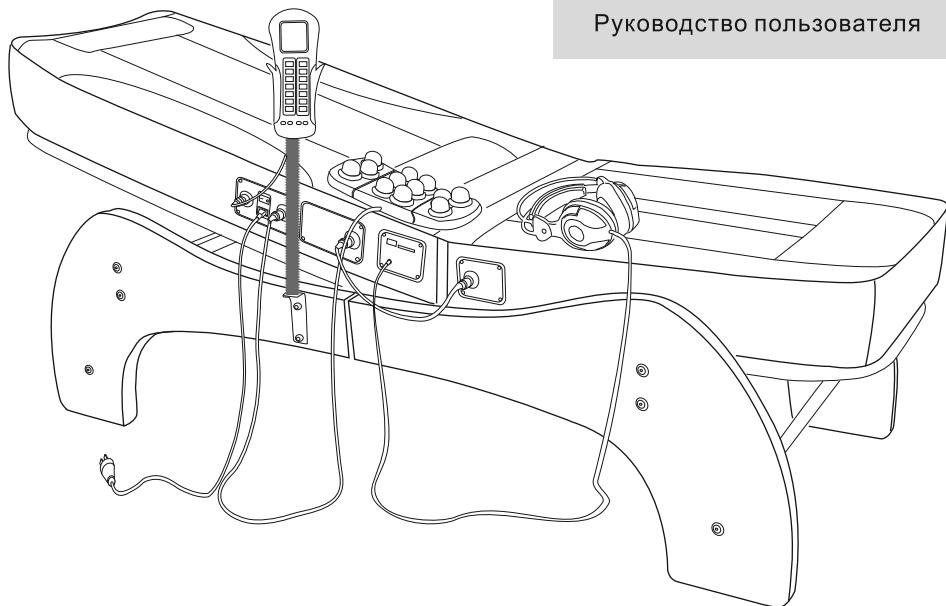

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Спасибо за приобретение массажной кровати Lux Tag.

Пожалуйста, тщательно изучите инструкцию по эксплуатации перед использованием, обратите особое внимание на раздел по безопасности использования прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

Инструкции по безопасности	2
Структура массажной кровати	5
Панель соединений	6
Основные характеристики и эффективность	7
Взаимосвязь внутренних органов и отделов позвоночника	8
Инструкция к пульту управления	10
Рекомендации по использованию	13
Содержание и уход за массажной кроватью	13
Приложение	14
Спецификация	17



Важно!

- Используйте необходимое напряжение для подключения массажной кровати, в противном случае, это может привести к пожару или поломке механизмов
- Всегда отключайте массажную кровать от питающей розетки после использования и перед чисткой массажера, чтобы избежать повреждения техники или травм.
- Пожалуйста, используйте массажную кровать согласно методам, описанным в данной инструкции.
- Не применяйте не рекомендуемые части или аксессуары.
- Не используйте массажную кровать на улице.
- Не используйте массажную кровать в целях, не указанных в инструкции.
- Не используйте кровать, если поврежден кабель.
- Рекомендация: не используйте массажную кровать беспрерывно более 2-х часов.
- Не используйте массажную кровать после принятия алкоголя или при плохом самочувствии.
- Отключите прибор от питающей розетки, если произошла остановка работы или отключение электричества, чтобы избежать непредсказуемых поломок.
- Не используйте массажную кровать беспрерывно. Необходимо сделать перерыв в 4 часа, если вы получаете несколько сеансов в сутки.

ТРЕБОВАНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Не используйте массажную кровать в ванной или другом влажном помещении, это может привести к удару электрическим током.

Не используйте массажную кровать при очень высокой температуре.

Не используйте массажную кровать вблизи нагревательных приборов или под прямыми солнечными лучами, это может привести к пожару.

Не используйте массажную кровать в пыльном месте.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Следующим людям рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем использовать массажную кровать:

Людям, больным остеопорозом.

Тем, кто страдает от серьезных сердечных болезней или носит электронные приборы, например, электронный стимулятор сердца.

Людям, испытывающим гипертермию.

Людям с протезами или имплантатами.

Людям со злокачественными опухолями.

Людям с проблемами в межпозвоночных дисках.

Беременным женщинам и женщинам в менструальный цикл.

Людям, имеющим раны или проблемы с кожей.

Детям до 12 лет, людям, которые не имеют возможности самостоятельно управлять массажной кроватью.

Людям, которым показан покой.

Людям с повышенной температурой.

В случае, если тело человека влажное.

Людям, чувствительным к тепловому прогреванию

В послеоперационный период

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Убедитесь, что напряжение в сети соответствует спецификации.
2. Не подключайте/ отключайте провод питания влажными руками.
3. Держите прибор далеко от источника воды, попадание воды может привести к удару электрическим током, повреждениям или травмам.
4. Не сгибайте, не тяните провод питания и не ставьте на него тяжелые предметы.
5. Не очищайте провод питания, штекель и другие электрические части влажной тканью.
6. Сразу же сойдите с кровати, если произошло внезапное отключение электричества.
7. В случае возникновения нежелательного эффекта, прекратите использование и обратитесь к врачу.

Максимальный вес пользователя массажной кровати — 110 кг.


ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОДЕРЖАНИЮ МАССАЖНОЙ КРОВАТИ

- Используйте прибор согласно инструкции. При возникновении вопросов, обращайтесь в сервисный центр.
- При поломке не производите ремонт самостоятельно. Обратитесь в сервисную службу или к квалифицированному специалисту.
- После использования всегда отключайте прибор от питающей розетки.
- Не используйте массажную кровать, если питающая розетка неисправна.
- Пожалуйста, сверните кабель, если вы не будете использовать массажную кровать долгое время, и храните прибор в сухом и не пыльном месте
- Не держите прибор в помещении с высокой температурой воздуха, рядом с огнем или под прямыми солнечными лучами.
- Очищайте прибор сухой тканью, не используйте средства для очистки с содержанием спирта и других едких веществ.
- Внутренний механизм спроектирован таким образом, что не нуждается в специальном обслуживании.
- Не используйте массажную кровать беспрерывно, необходимо делать остановки.

НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ МАССАЖНОЙ КРОВАТИ:


- Небольшой шум от работы мотора — это нормальное условие работы.
- Если прибор не работает, проверьте, плотно ли подключен провод к питающей розетке.
- Если произошла остановка работы: истекло время массажной программы, либо массажная кровать работала слишком долго, защитный температурный датчик произвел отключение автоматически. Пожалуйста, сделайте перерыв на пол часа и продолжайте использование.

СТРУКТУРА МАССАЖНОЙ КРОВАТИ

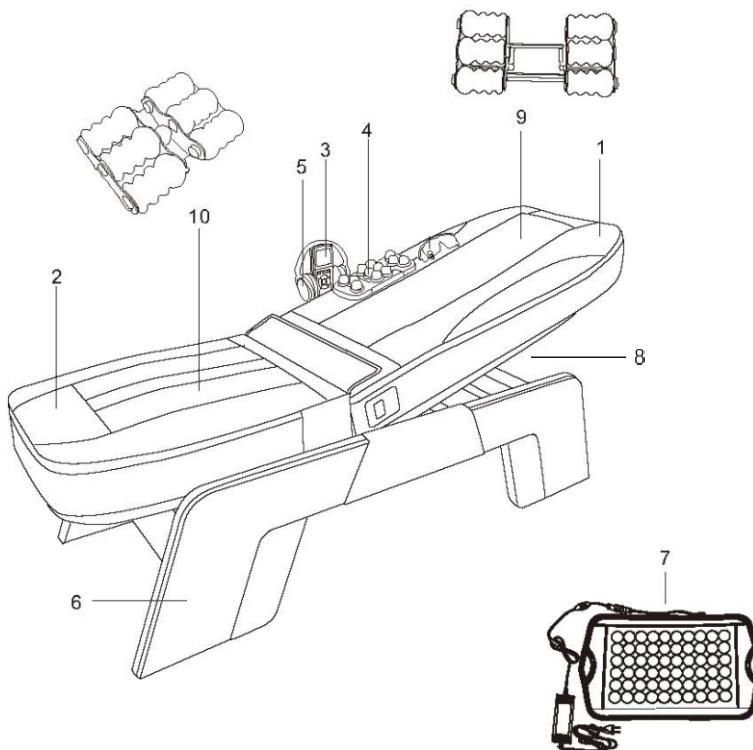


- | | | | |
|---|-----------------------|----|--------------------------------------|
| 1 | Верхний массажный мат | 6 | Деревянная рама-каркас |
| 2 | Нижний массажный мат | 7 | Нефритовый прогревающий коврик |
| 3 | Пульт управления | 8 | Подъемный механизм |
| 4 | Ручной проектор мата | 9 | Верхний внутренний роликовый элемент |
| 5 | Наушники | 10 | Нижний внутренний роликовый элемент |


ПАНЕЛЬ СОЕДИНЕНИЙ

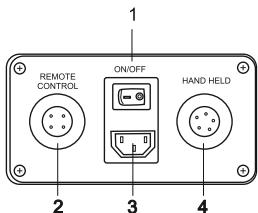


- 1 - Главный переключатель питания
(включение/ выключение)
- 2 - Разъем подключения пульта управления
- 3 - Разъем для подключения провода питания
(220 В)
- 4 - Разъем для подключения ручного проектора

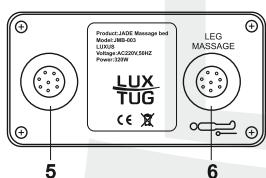

- 5 - Разъем для подключения нефритового коврика
- 6 - Разъем для подключения нижнего мата

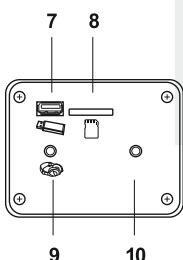

- 7 - USB разъем
- 8 - Разъем для SD карты
- 9 - Разъем для подключения наушников
- 10 - Разъем для подключения миостимуляторов

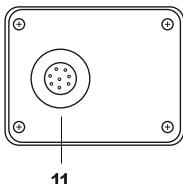

- 11 — Разъем для подключения верхнего мата

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Массажная кровать Lux Tag совмещает в себе знания традиционной восточной медицины и современных западных технологий. Помогает улучшить циркуляцию крови, обмен веществ, укрепить иммунитет и получить общеоздоравливающий эффект.
- Внутренний нефритовый массажный элемент расположен на специальной рельсе. Продолжительное надавливание на основные точки тела ускоряет формирование новых кровяных клеток и способствует естественному процессу оздоровления организма.
- Для массажной кровати Lux Tag используется нефрит высшего качества в виде массажного элемента из роликов и полусфер. Нефрит содержит различные микроэлементы: цинк (Zn), селен (Sc), магний (Mg), медь (Cu) и др., которые, поступая в тело человека, нормализуют работу всех органов.
- Терапевтическая нефритовая терапия производится благодаря нагреву натуральных нефритовых камней, которые излучают длинные инфракрасные волны. Тело человека поглощает инфракрасные волны, возникает резонанс среди молекул воды в организме, ускоряется рост клеток и процессы регенерации в организме. В результате этих процессов активизируется работа иммунной системы.
- Каждый орган посредством нервов связан с позвоночником. Поэтому дисфункция отдельных органов лечится воздействием на определенные точки спины.
- Массажная кровать Lux Tag применяется для вспомогательного лечения следующих заболеваний: поясничной межпозвоночной грыжи, гипертонии, прогрессирующего артрита, бессонницы, запоров, шейной межпозвоночной грыжи, менструальных спазмов, воспаление предстательной железы и др., оказывает согревающий и оздоравливающий эффект.
- Вы можете устанавливать длительность массажа от 5 до 95 минут, и регулировать температуру прогрева от 40 до 70° С.
- Длина массажного воздействия регулируется под рост конкретного человека.
- Пульт управления имеет крупный жидкокристаллический дисплей и удобные клавиши.
- Отдельно подсоединяется массажный элемент из 12 нефритовых полусфер для массажа рукой живота и груди.
- Основной мат массажной кровати имеет автоматический механизм поднятия/раскладывания, который обеспечивает комфортное поднятие пожилых людей, а также может применяться для настройки удобной позиции при чтении газеты во время массажа.
- Массажная кровать оборудована MP3 плеером, который имеет USB разъем, а также разъем для SD карт.
- Как вместе с кроватью, так и самостоятельно Вы можете использовать нефритовый коврик для прогрева других частей тела.
- Массажная кровать оснащена миостимулятором. Накожные электроды подают импульс на нервные окончания, и мышцы начинают активно сокращаться. Регулярное использование позволит восстановить тонус мышц, облегчить боли, расслабиться и снять стресс.
- Функция нагрева боковых панелей

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ И ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА

Клинические исследования показали, что каждый орган связан нервами с позвоночником. Таким образом, активно применяется такие методики воздействия на позвоночник, как: термотерапия и хиропрактики для воздействия на другие жизненно важные органы.

Представляем Вам данные о том, с какими органами связан каждый из отделов позвоночника.

Шейный отдел (С1-С7)

- С1: Циркуляция крови, голова, мозг, уши
- С2: Глаза, зрительный нерв, слуховой нерв
- С3: Щеки, ухо, зубы
- С4: Нос, губы, ротовая полость
- С5: Голосовые связки, глотка
- С6: Мышцы шеи, плечи, миндалевидная железа
- С7: Щитовидная железа, локти

Грудной отдел (Т1-Т12)

- Т1: Руки, запястья, пальцы
- Т2: Сердце, коронарная артерия
- Т3: Легкие, бронхи
- Т4: Желчный пузырь
- Т5: Печень, циркуляция крови
- Т6: Желудок
- Т7: Поджелудочная железа, двенадцатиперстная кишка
- Т8: Селезенка
- Т9: Надпочечные железы
- Т10: Почка
- Т11: Почка, мочеточник
- Т12: Тонкая кишка, лимфатическая система

Поясничный отдел (L1-L5)

- Л1: Толстая кишка, пах
- Л2: Аппендицит, брюшная полость
- Л3: Половые органы, матка, пузырь
- Л4: Предстательная железа, седалищные нерв
- Л5: Голени, лодыжки, стопы

Крестец/копчик


- Бедро, прямая кишка

Шейный отдел
(С1-С7)


Грудной отдел
(Т1-Т12)

Поясничный отдел
(L1-L5)

Крестец
копчик

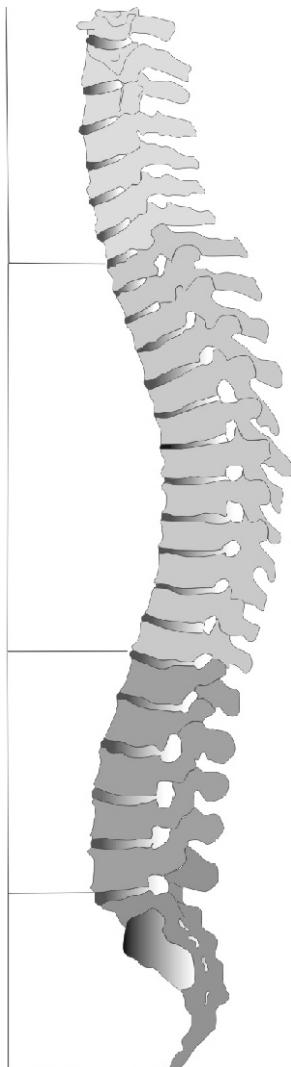

ИНСТРУКЦИЯ К ПУЛЬТУ УПРАВЛЕНИЯ

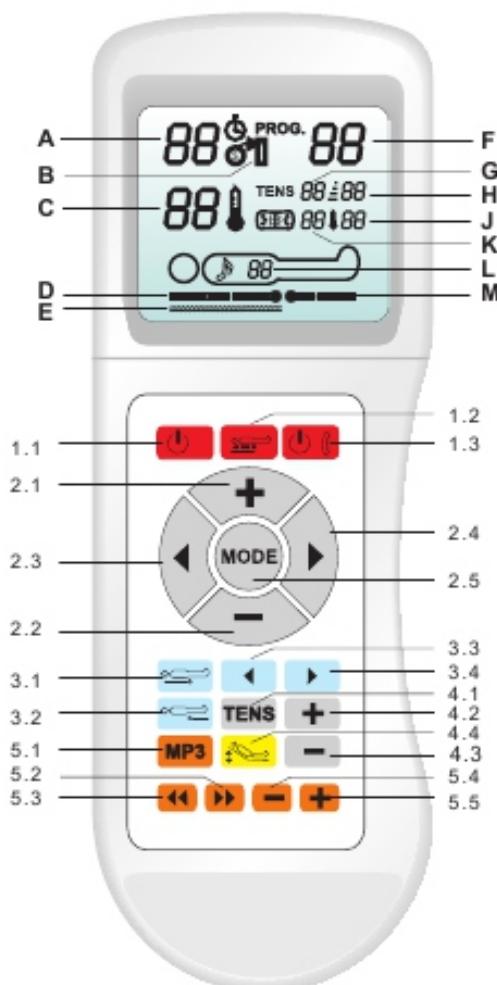

ИНСТРУКЦИЯ К ПУЛЬТУ УПРАВЛЕНИЯ

1.1 Включение/ выключение массажной кровати ON/OFF

Внимание! Пульт управления активен только после того, как основная клавиша включения находится в положении «I» (включено).

После нажатия клавиши On на панели управления массажный проектор начнет двигаться, чтобы занять стартовое положение. Индикация этого процесса появится на

внизу ЖК дисплея: «D» - массаж спины, «M» — массаж ног. В это время другие клавиши пульта управления будут неактивны.

1.2 Включение/ выключение нагрева боковых панелей

Эта клавиша позволяет включить/ выключить дополнительный нагрев панелей верхнего мата, на дисплее появится индикация "E".

1.3 Включение/ выключение ручного проектора

С помощью этой клавиши можно включать/ выключать ручной проектор во время работы массажной кровати (отображение времени работы на дисплее «A >0»). Дисплей будет соответственно отображать «K». Индикатор работы нефритового коврика - «J», включается автоматически вместе в массажной кроватью.

2.3/2.4 Выбор режимов

Нажимая на эти клавиши, Вы можете выбирать режимы исходя из длительности массажа (отображение «A»), температуры внутреннего массажного проектора («C»), температуры ручного проектора для массажа верхней части тела («K»), температуры нефритового коврика («J») и области массажа («D»).

Внимание! Для выбора желаемого режима необходимо вначале активировать клавишу 2.5 «Режим»

2.1/2.2 Клавиши + / - (вверх/ вниз)

Эти две клавиши позволяют изменить режим.

1) Длительность массажа (отображение "A"). Вы установить от 5 до 95 минут (каждое нажатие будет увеличивать/ уменьшать время на 5 минут). В случае, если «A» составляет 5 минут, нажав клавишу 2.2 уменьшения «-», Вы можете сразу же установить длительность в 95 минут.

2) Температура нефритовых роликов (отображение "C")

При регулировке температуры внутреннего проектора вы можете установить от 40 до 70°C. Каждое нажатие будет уменьшать/ увеличивать температуру на 5 °C. В случае, если «C» составляют 40 °C, нажав клавишу 2.2 «-», Вы можете сразу же установить температуру 70 °C.


3) Программы массажа (отображение «F»)

Клавиши 2.1 и 2.2 служат для выбора программ массажа


P0 – это полезная для здоровья программа, может отвечать разнообразным предпочтениям, т.к. регулируется вручную.

P1 – автоматическая программа, которая производится согласно диаграмме.


Внутренний массажный проектор останавливается на 12 точках на 10 секунд для глубокого прогревания биологически активных точек.

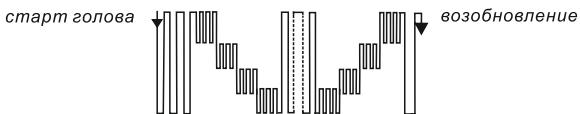

P2 – автоматическая программа, которая производится согласно диаграмме.

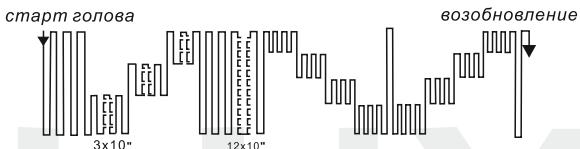


Предупреждение! В рамках программы P1 и P2 Вы не можете регулировать область воздействия роликов (отображение «D»)

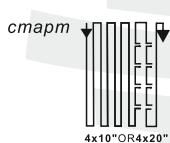


Время прогревания (I) 10 секунд и (II) 20 секунд

Имеют одинаковую диаграмму. Сначала внутренний проектор проходит 3,5 шаговых расстояния без остановки, а затем останавливается на 4-х точках на 10 или 20 секунд для прогревания каждой из точек. После этого проектор возобновляет процесс.

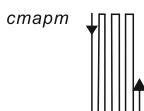

0 секунд

Внутренний проектор движется без остановки, пока не истечет время программы.

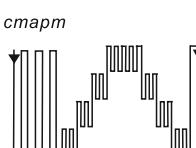

10 секунд в переменном режиме 20 секунд в переменном режиме

Сначала внутренний проектор проходит 3,5 шаговых расстояния без остановки. Затем проектор производит движения вверх и вниз в четырех областях в течение 10 или 20 секунд на каждую из областей. После этого проектор возобновляет процесс.

Для выбора программы массажный элемент должен находиться в режиме остановки в исходном положении. После выбора программы нажмите клавишу 3.1 для активации работы верхнего мата с заданной программой.

4) Миостимуляторы (отображение "G")

- 3 режима работы миостимуляторов для тела: акупунктурный "Р1", массажный "Р2" и огненный"Р3"
- 6 режимов работы миостимуляторов для ушей: "04"(4HZ), "06", "08", "10", "12" and "14".

5) Температура ручного проектора (отображение "K")

Вы можете установить температуру ручного проектора от 40 до 70°C. Каждое нажатие будет уменьшать/ увеличивать температуру на 5 °C. Когда температура составляет 40°C, Вы можете одним нажатием клавиши 2.2. «-» установить 70°C

6) Температура нефритового коврика(отображение "J")

Вы можете установить температуру ручного проектора от 40 до 70°C. Каждое нажатие будет уменьшать/ увеличивать температуру на 5 °C. Когда температура составляет 40°C, Вы можете одним нажатием клавиши 2.2. «-» установить 70°C

7) Массажная область (отображение "D")

Вы можете отрегулировать длину области массажа в зависимости от роста пользователя. Эта функция может применяться в программах Р1 и Р2.

3.1/3.2 Запуск/ остановка массажа спины/ ног

Этими клавишами Вы можете запустить/ остановить автоматические программы массажа спины или ног. Если массажный ролик находится в работе, на дисплее будет мигающее отображение If the massage roller is running it will ("F" и "G").

3.3/3.4 Ручное управление массажем спины

С помощью этих клавиш Вы можете управлять внутренним массажным проектором для массажа спины, передвигая его вперед и назад. При нажатии клавиша 1 раз, проектор начнет движение в данном направлении. При повторном нажатии клавиши, проектор остановится в последней занимаемой позиции. Когда проектор достигает верхней или нижней границы, остановка происходит автоматически.

4.1 Включение/ выключение миостимуляторов

4.2/4.3 Интенсивность работы миостимуляторов отображение"Н")

Этими двумя клавишами можно выбрать уровень интенсивности миостимуляций от 1 до 10 уровня.

4.4 Поднятие/ раскладывание основного мата

Используйте эти две клавиши для поднятия и раскладывания в горизонтальное положение основного мата. Нажмите клавишу один раз для поднятия верхнего мата, повторное нажатие заставит мат раскладываться в горизонтальное положение, третье нажатие остановит и зафиксирует положение мата.

5.1 Включение/ выключение MP3 плеера

5.2/5.3 Последующая/ предыдущая MP3 запись

5.4/5.5 Увеличение/ уменьшение громкости Mp3

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед использованием пульта управления

Займите горизонтальное положение на массажной кровати. Ваша голова должна оказаться в верхней части основного матраца, а ноги - на дополнительном матрасе. Расположитесь на кровати таким образом, чтобы в стартовой позиции нижняя часть массажных шаров находилась в верхней точке таза. Нижняя часть таза должна находиться на твердой части основного матраса.

Если давление на массажный проектор слишком велико, массаж будет автоматически приостановлен по причине безопасности. В этом случае, пожалуйста, снизьте давление или остановите работу массажного проектора с помощью пульта управления. В противном случае прибор может быть поврежден.

Подушку следует использовать только в том случае, если вы испытываете дискомфорт во время массажа шеи или плеч. Подушка снижает общий массажный эффект.

До и после использования массажера настоятельно рекомендуется выпивать значительное количество воды, чтобы избежать головокружений, помочь организму избавиться от токсинов в связи с активным обменом веществ.

СОДЕРЖАНИЕ И УХОД ЗА МАССАЖНОЙ КРОВАТЬЮ

Необходимо регулярно вытираять пыль с массажной кровати. Для этого следует снимать защитное покрытие, тщательно вытирая его сухой тканью. Также рекомендуется очищать алюминиевые направляющие, по которым движется внутренний механизм.

Регулярно проверяйте рабочее состояние всех гелиевых лампочек.


Не используйте кровать, если одна или несколько гелиевых лампочек перегорели. Учтите, что лампочки отключаются автоматически, после достижения необходимой температуры. Если одна из ламп перегорела, то не будут работать и все остальные, так как они находятся в одной линии. Поэтому постараитесь найти перегоревшую лампочку и замените ее.

Проверьте, не перетянут ли черный провод, который обеспечивает движение внутреннего механизма. Если есть хоть малейшее давление на провод, внутренний проектор не будет двигаться. Это также может привести к поломке кабеля или мотора.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Как закрепить передаточный кабель

Снимите защитное покрытие массажной кровати, вы увидите устройство, регулирующее кабель. Ослабьте две внутренние гайки и закрутите соответственно две наружные гайки, болт натягивает и закрепляет кабель.



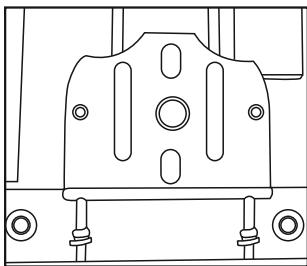


Как заменить лампочку:

- отключите провод от питающей розетки
- расстегните молнию и снимите защитное покрытие
- открутите два болта, которыми крепится патрон лампы
- выверните патрон
- извлеките перегоревшую лампу из патрона


Внимание! Лампочки могут быть горячими!

- вставьте новую лампочку в патрон и поместите патрон на место
- укрепите патрон с помощью болтов
- наденьте на основной мат защитное покрытие и возобновите работу массажной кровати.

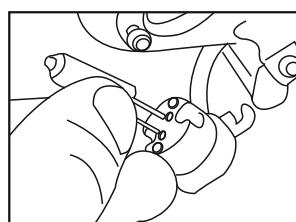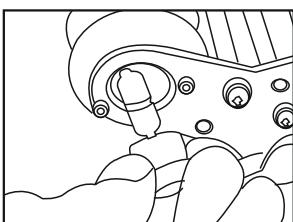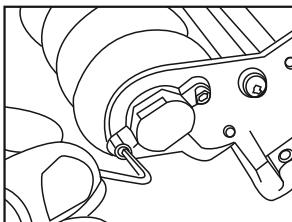


КАК ЗАМЕНИТЬ ПЕРЕДАТОЧНЫЙ КАБЕЛЬ ВНУТРИ ОСНОВНОГО МАТА

- расстегните молнию и снимите защитное покрытие
- ослабьте и снимите металлическое покрытие мотора
- открутите 3 болта (1)
- извлеките наполнение и ослабьте устройство регулирования другого кабеля (2)
- извлеките кабель из-под внутреннего проектора

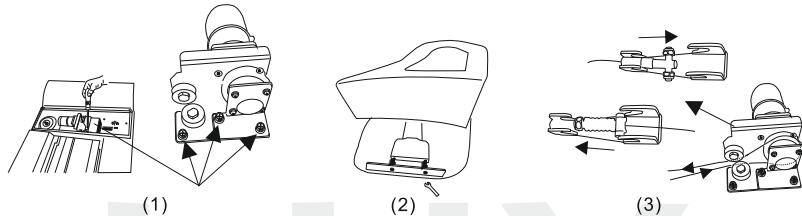


- установите новый кабель через зубчатые колесики передаточного мотора
- подвесьте один конец кабеля к устройству (4) и потяните внутренний проектор к концу направляющей со стороны мотора (5)

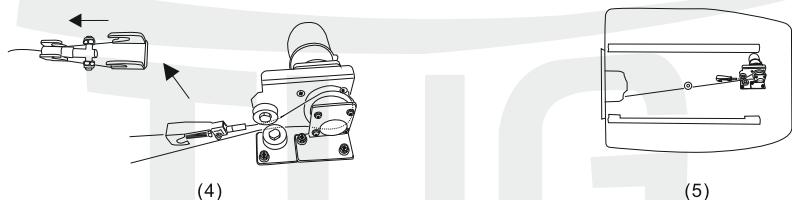


- подвесьте другой конец кабеля на устройство (6), затем поместите кабель в колесо устройства, регулирующего кабеля, и закрепите его с помощью болтов и гаек(7).
- Замена кабеля завершена

Предупреждение! Кабель должен быть натянут как гитарная струна

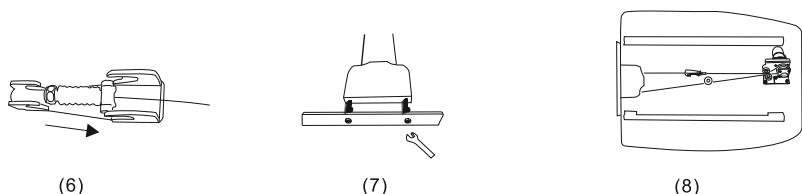


КАК ЗАМЕНИТЬ ПЕРЕДАТОЧНЫЙ КАБЕЛЬ ВНУТРИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МАТА (ДЛЯ МАССАЖА НОГ)


- открутите болты дополнительного мата (1) на панели, расстегните молнию и снимите покрытие, вытащите наполнение (2)
- ослабьте и снимите металлическое покрытие мотора (3)

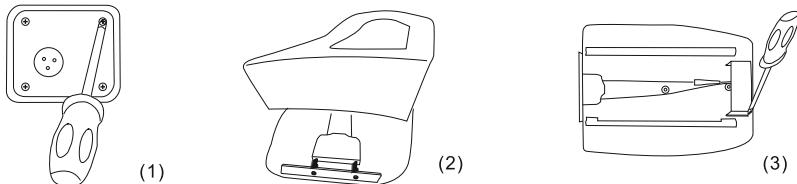


- ослабьте гайки (4) и вытащите кабель из колесика (4) и из-под внутреннего проектора (5)

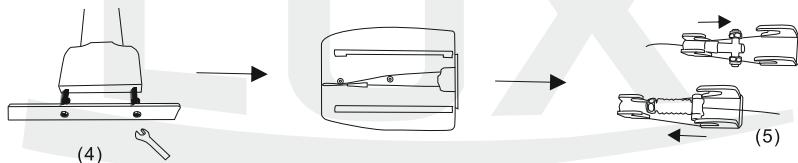

- ослабьте гайки кабеля и вытащите его через шестерню мотора (6)
- ослабьте гайки так, чтобы проложить новый кабель через шестерню, и закрепите болты гайками
- подвесьте один конец кабеля на устройство (7) потяните внутренний проектор к концу направляющей со стороны мотора (8)

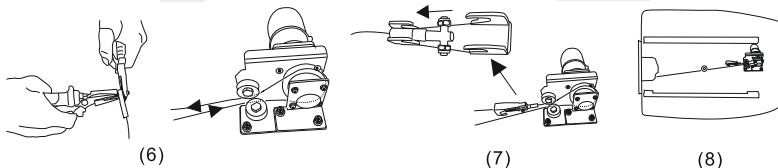

- подвесьте другой конец кабеля на устройство (9), затем поместите кабель в колесо и зафиксируйте устройство, регулирующего кабель (10)
- замена кабеля завершена (11)

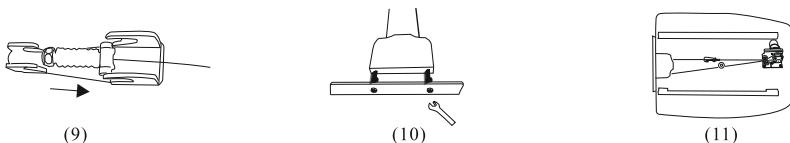

СПЕЦИФИКАЦИЯ

название	Нефритовая массажная кровать LuxTag
модель	JMB-004 / ALL
питание/частота	230 В / 500Гц
потребляемая мощность	400 Вт
диапазон температур	40-70 С
длительность работы	5-95 минут
размеры в разложенном виде	200 x 70 x 55 см
вес в упаковке	99 кг
вес без упаковки	93 кг
рама	деревянная рама-каркас
цвета защитного покрытия	бежевый